




Erinox

Specialrengøringsmiddel

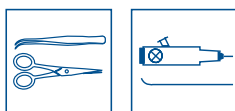

Lavtskummende rengøringsmiddel til manuel rengøring af instrumenter og udstyr samt til anvendelse i ultralydsbade.

Anvendelsesområde Til manuel rengøring af fleksible og stive endoskoper, sarte og følsomme instrumenter i sundhedssektoren og dentalbranchen, til rengøring af skrøbeligt glas og laboratorieudstyr samt som rengøringsmiddel i ultralydsrensere.

Medicinsk udstyr til professionel brug.

Produktegenskaber Skånsomt overfor følsomme instrumenter og materialer herunder aluminium, glas og plastic. Fjerner effektivt fedtsmuds og kropsvæsker. Også effektivt til instrumenter og udstyr med små hulrum.

Brugsanvisning Lav en opløsning af Erinox specialrengøring i henhold til anvisningen. Udskift opløsningen dagligt. Ved manuel rengøring, brug en ny opløsning til hver vask. Skyl instrumenterne med rent vand efter rengøring og tør dem. Placer instrumenterne løst i ultralydsrenseren. Skyl instrumenterne med rent vand efter vask. Desinficer instrumenterne efter vask ved behov.

Brugsanvisning	Opløsning	Erinox	Vand	Bemærkning
Ultralydsrensere	1 -2%	10 -20 ml	1 liter	Udskift opløsningen 1-2 gange dagligt Iblødsætning 2% ved behov
Manual rengøring:				
Endoskoper	2%	20 ml	1 liter	
Andre instrumenter og udstyr	1-2%	10-20 ml	1 liter	
Meget snavsede instrumenter	5%	50 ml	950 ml	

Indhold	Ingrediens	Effekt
	Nonioniske overfladeaktive stoffer	< 5% Vaskeaktivt stof, opløser snavs
	Polycarboxylat	<5% Rengørende effekt, opløser snavs og binder det til vandet

pH produkt	10.0
pH brugsopløsning	10.0
Opbevaring	Opbevares ved 5-35°C. Holdbarhed: 3 år fra produktionsdato.
Udseende og duft	Klar væske.
Produktionsland	FINLAND
Anvendelses- og miljø sikkerhed	Alvorlige hændelser i forbindelse med produktet skal rapporteres til asiakaspalvelu@kiilto.com og den lokale myndighed for medicinsk udstyr (Lægemiddelstyrelsen). Læs brugsanvisning før brug. Sikkerhedsinstruktioner findes på produktets sikkerhedsdatablad.
Emballagematerialer	Emballagen er fremstillet af HDPE plast, som er et genanvendeligt materiale.

Forpackingsstørrelse / Varenummer	Salgsenhed	Varenummer	GTIN	GTIN (salgsenhed)
	6 x 1 l	8113	6417964081138	6417964483536
	3 x 5 l	8114	6417964081145	6417964483543



Øvrig information	Tjek den senest opdaterede version af brochuren på vores hjemmeside www.kiilto.dk eller send en mail til kundeservice på info.dk@kiilto.com .
--------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------